karrdental



La confiance au service de la régénération osseuse

avec les biomatériaux Geistlich et Allodyn®

leading regeneration

Geistlich

Allodyn® : Allogreffe de haute qualité pour la régénération osseuse

Pourquoi proposer une allogreffe est essentiel

Les cliniciens sont confrontés à une grande diversité de situations en régénération, et disposer de différents types de greffons permet une planification thérapeutique plus personnalisée. Les allogreffes d'origine humaine offrent une structure tissulaire naturelle et un environnement biologique familier, ce qui en fait une option pertinente dans certaines procédures de régénération sélectionnées. Certains cliniciens apprécient leurs caractéristiques de manipulation et leurs propriétés de remodelage osseux, tandis que certains patients préfèrent les matériaux d'origine humaine pour des raisons personnelles ou éthiques.

Proposer une alternative avec une allogreffe enrichit l'arsenal thérapeutique et permet une planification personnalisée avec davantage de flexibilité et de choix.

Sommaire

2 Allodyn® :
Allogreffe de haute qualité pour la régénération osseuse

4–17 Recueil de cas cliniques
Dr Amit Patel
Dr Alfonso Rao
Dr Romain Ohanessian
Dr Azim Malik

18 Geistlich – Engagée dans la médecine régénérative

19 Développez-vous avec Geistlich

Allodyn® (Laboratories O.S.T.) est est une allogreffe osseuse de haute qualité destinée à la chirurgie dentaire issue de dons éthiques de donneurs vivants lors de procédures de remplacement de hanche. Chaque donneur fait l'objet d'une sélection rigoureuse, et une traçabilité parfaite est assurée. Grâce à la préservation de son collagène et de sa structure minérale naturels, Allodyn® constitue un excellent support pour la régénération osseuse. Fort de plus de 25 ans d'utilisation clinique, de techniques de stérilisation de pointe et de résultats éprouvés, ce produit biocompatible offre des performances fiables, tant pour les cliniciens que pour les patients[1–4].

Procédé OSTEOPURE™

Débridement par fluide pulsé
Le nettoyage sélectif des têtes fémorales permet d'éliminer les tissus nécrosés tout en préservant l'os sain.

Inactivation virale
Un procédé breveté et contrôlé par ordinateur garantit la sécurité microbiologique sans compromettre la structure osseuse.

Déshydratation par substitution moléculaire
Une déshydratation douce à base d'éthanol préserve le collagène, évite les dommages liés à la lyophilisation et assure la désinfection.


Stérilisation par faisceau d'électrons
Garantit la stérilité avec un impact minimal sur le collagène et sans exposition à la radioactivité.



Tête fémorale d'un donneur vivant.



Tissus nettoyés par débridement par fluide pulsé

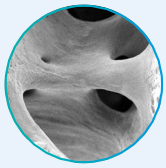

Os trabéculaire nettoyé avec conservation de la structure.



Dr Romain Ohanessian,
Toulon, France

« Allodyn® assure une stabilité volumique et une intégration naturelle prévisibles pour un succès esthétique durable. »



Pourquoi Allodyn® fait la différence

1.

Éthique & traçabilité complète
Issu exclusivement de donneurs vivants lors de chirurgies de remplacement de hanche, avec une traçabilité totale.

2.

Structure osseuse naturelle préservée
Matrice de collagène et de minéraux pour une ostéoconductivité optimale.

3.

Excellent profil de sécurité clinique
Inactivation virale et stérilisation avancées pour une sécurité microbiologique renforcée.

4.


Manipulation hydrophile
Amélioration de l'absorption des fluides pour une prise rapide du sang ou du PRF.

5.

Résistance mécanique comparable à celle de l'os frais
Assure stabilité et résistance lors des procédures de greffe.

Retours cliniques de la pratique quotidienne

Vingt-et-un experts cliniques ont donné leur avis concernant l'utilisation d'Allodyn® sur la base des traitements dispensés à plus de 4 000 patients ces dernières années[5].

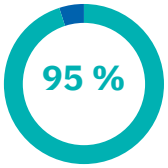

Performance
95 % ont évalué la performance comme très bonne ou excellente.

> Forte confiance clinique et résultats prédictibles.



Pose d'implant plus précoce
90 % des cliniciens ont indiqué pouvoir poser les implants plus tôt.

> Amélioration du flux de travail et réduction des délais de traitement.



Taux de recommandation
Tous les utilisateurs recommanderaient Allodyn® à leurs confrères.

> Signe d'une grande confiance et d'un haut niveau d'adhésion.



Utilisation continue
Tous les utilisateurs continueront à utiliser Allodyn® dans leur pratique.

> Niveau de satisfaction élevé et valeur constante dans le temps.



Confiance et sécurité
Les utilisateurs soulignent l'importance du procédé OSTEOPURE™ et de la stérilisation par E-Beam, mettant en avant le besoin de produits sûrs et de haute qualité.

O.S.T. est une banque de tissus autorisée par les autorités sanitaires françaises et spécialisée dans la production d'allogreffons viro-inactivés et, plus généralement, dans les produits destinés à la régénération osseuse. Grâce à un partenariat stratégique avec O.S.T., Geistlich obtient les les droits de distribution mondiaux de la gamme bien connue et établie d'allogreffes dentaires Allodyn®.

Préservation alvéolaire en secteur postérieur maxillaire



Dr Amit Patel
Birmingham,
Royaume-Uni

« Si la pose implantaire immédiate n'est pas envisageable, je procède à la préservation de la crête et je préfère utiliser une allogreffe afin de favoriser un remodelage plus rapide, et de soutenir les dents adjacentes. »

Situation initiale
La 24 présentait une perte osseuse vestibulaire importante et un pronostic défavorable justifiant son extraction. La santé bucco-dentaire était bonne, avec une légère récession gingivale de 1 à 2 mm.

Approche thérapeutique
Après l'extraction atraumatique de la dent 24, l'alvéole a été soigneusement curetée. Une membrane Geistlich Bio-Gide® a été positionnée en direction vestibulaire, sous le défaut osseux afin de protéger le substitut osseux Allodyn®. Le greffon a été placé dans l'alvéole avant de rabattre la membrane par-dessus en direction palatine. Le site a été refermé à l'aide de sutures 5-0 Vicryl Rapide.


Résultat final
À 5 mois, une évaluation par CBCT a été réalisée afin de planifier la prochaine étape de la réhabilitation.


Mes recommandations

> Utiliser Allodyn® pour une mise en place précoce lorsque l'implantation immédiate n'est pas possible.

> Lorsque les dents adjacentes présentent une perte osseuse, je privilégie l'utilisation d'un allogreffe pour un remodelage osseux accéléré.


> Envisager une cicatrisation ouverte afin de préserver les tissus kératinisés.

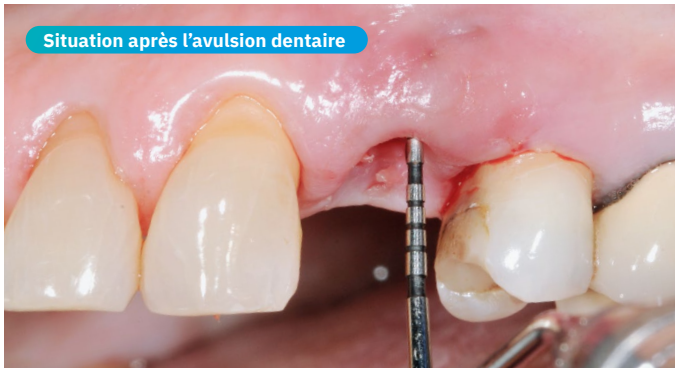

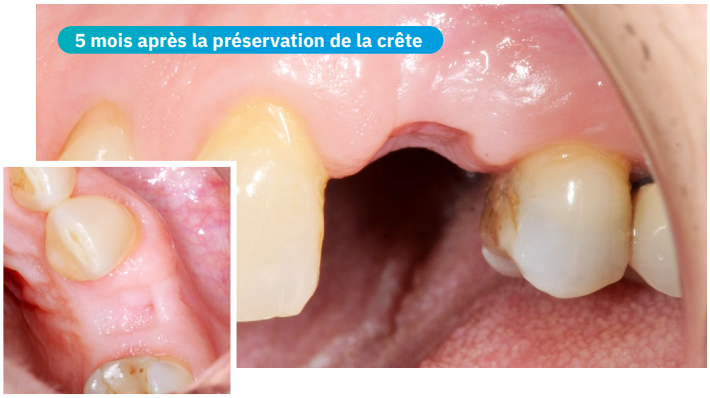




L’extraction de la 24 est indiquée en raison d’une maladie parodontale avancée accompagnée d’une perte osseuse sévère s’étendant jusqu’à l’apex. La paroi osseuse vestibulaire est absente.

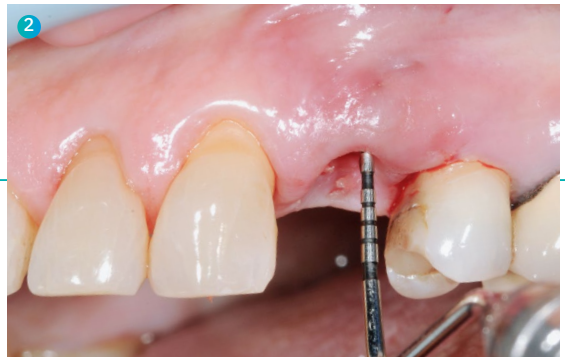


Situation clinique immédiatement après l’extraction de la 24.




La membrane Geistlich Bio-Gide® est découpée et mise en place de manière à protéger la face vestibulaire de l’alvéole.

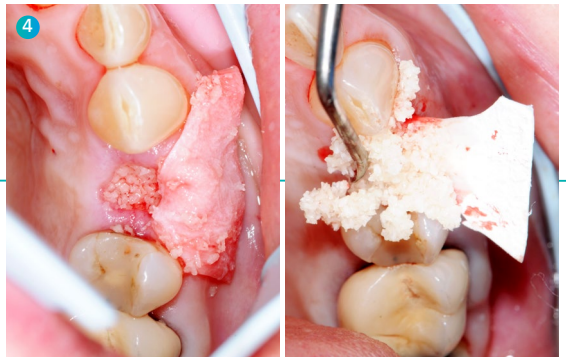

L’alvéole d’extraction est comblée avec Allodyn® ; la membrane est insérée sous les tissus mous palatins.

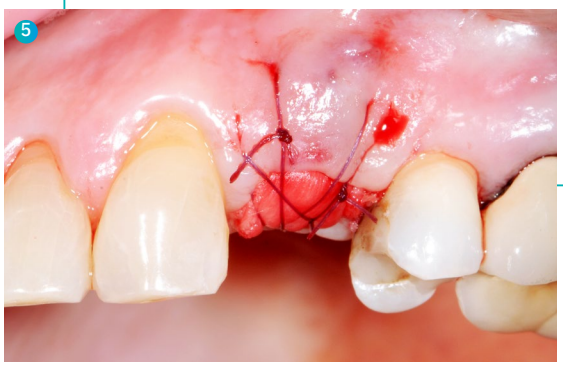

La membrane Geistlich Bio-Gide® est laissée exposée afin de permettre une cicatrisation ouverte. Une suture en matelassier horizontale avec un fil résorbable Vicryl Rapide 5-0 est réalisée pour la stabilisation du site.

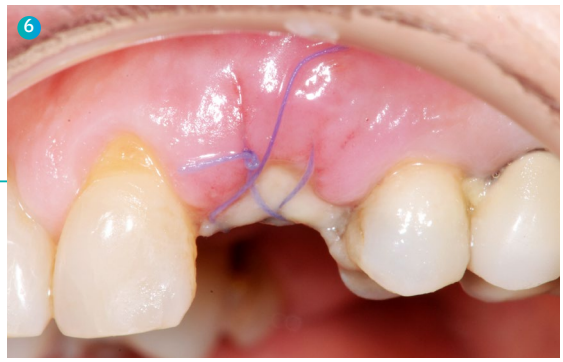


Cicatrisation des tissus mous 2 semaines après l’intervention, au moment du retrait des sutures.

Produits utilisés

Allodyn® CS Fine
(1,0 cm³)



Geistlich Bio-Gide®
(25 × 25 mm)

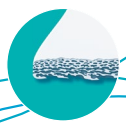

Mise en place implantaire immédiate en secteur postérieur mandibulaire




Dr Alfonso Rao
Bristol, Royaume-Uni

« Je choisis toujours d'associer une allogreffe et Geistlich Bio-Oss® pour optimiser la régénération et obtenir des résultats durables. »

Situation initiale
Le patient présentait une pulpite irréversible au niveau de la 46. L'endodontiste a estimé que le pronostic pour cette dent était défavorable en raison de la profondeur du rebord gingival. Le patient a préféré le remplacement de la dent par un implant.

Approche thérapeutique
Après une extraction atraumatique préservant le septum, l'implant a été soigneusement mis en place dans la position souhaitée pour la prothèse. La paroi vestibulaire était absente en raison de la morphologie radiculaire. Les membranes Geistlich Bio-Gide® ont été positionnées puis fixées à l'aide de pins avant le comblement de l'alvéole avec Allodyn®. Des fils de suture en PTFE ont été utilisés dans le cadre d'une approche de cicatrisation ouverte afin de préserver la muqueuse kératinisée.

Résultat final
Après cicatrisation, l'implant présentait un quotient de stabilité de l'implant (ISQ) de 77. Une empreinte numérique a été réalisée, puis une couronne transvissée a été fabriquée et posée.

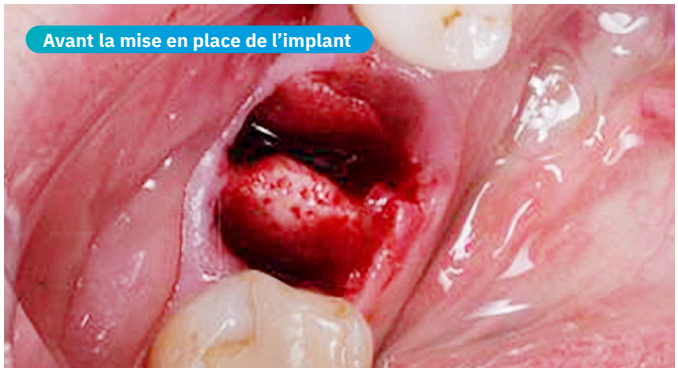



Mes recommandations

> Utiliser Geistlich Bio-Oss® pour la mise en place implantaire immédiate dans les alvéoles contenues.


> Dans les défauts à une paroi, utiliser Allodyn® seul ou en association avec Geistlich Bio-Oss® afin d'améliorer la stabilité du contour.

> Placer le pin principal avant l'introduction du matériau de comblement afin d'assurer une fixation optimale de la membrane.


> Envisager une cicatrisation ouverte afin de préserver les tissus kératinisés.




La 46 est extraite de manière atraumatique. La paroi vestibulaire est partiellement manquante.

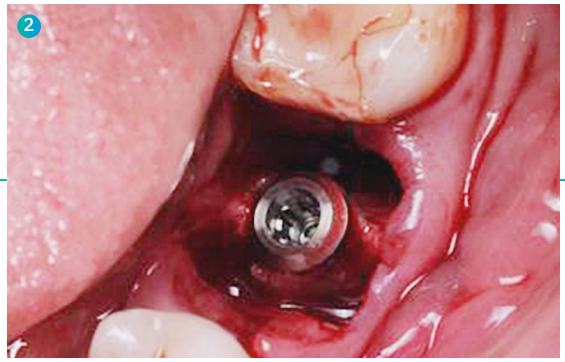


L'implant est placé dans une position guidée par la prothèse.

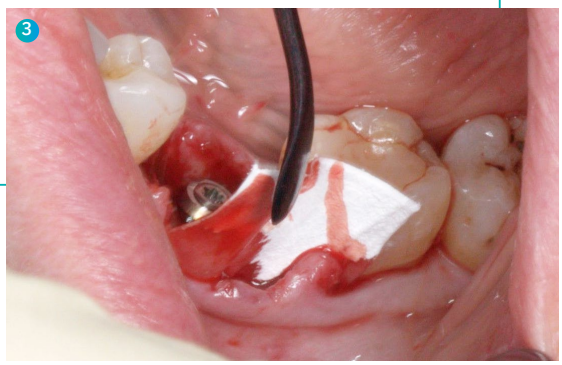

La membrane Geistlich Bio-Gide® est découpée et positionnée de manière à protéger la zone greffée vestibulaire.

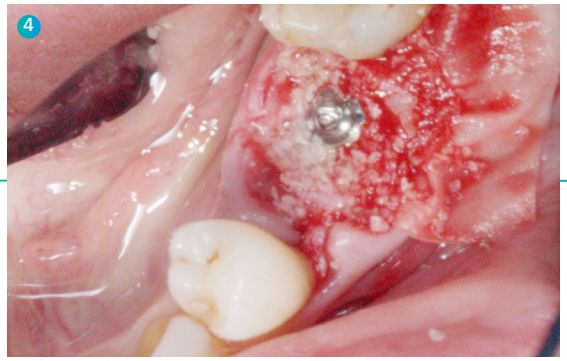

Le gap entre l'implant et les parois alvéolaires est comblé avec Allodyn®.

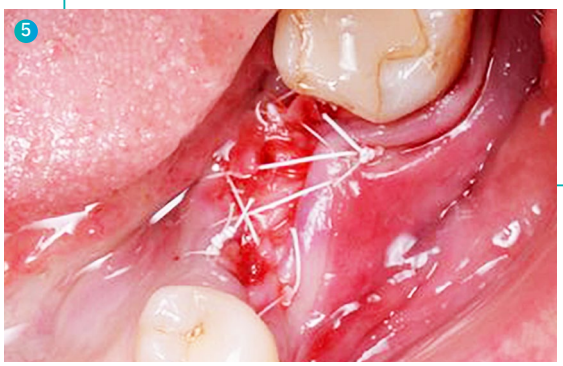

Le site est stabilisé au moyen d'une suture avec un fil en PTFE 4-0, selon une approche de cicatrisation ouverte avec Geistlich Bio-Gide® afin de préserver la muqueuse kératinisée.




Une couronne transvissée est posée sur le pilier.

Produits utilisés

Allodyn® CS Fine
(0,5 cm³)



Geistlich Bio-Gide®
(25 mm × 25 mm)

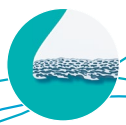

ROG autour des implants en secteur antérieur maxillaire



Dr Amit Patel
Birmingham,
Royaume-Uni

« Je choisis toujours d'associer Allodyn® et une membrane Geistlich Bio-Gide® pour optimiser la régénération et obtenir des résultats durables. »

Situation initiale
Le patient a été adressé par son chirurgien-dentiste traitant pour une consultation en vue d'un traitement implantaire. La dent 11 était absente, et le patient n'était pas satisfait de sa prothèse partielle amovible, préférant une solution fixe. L'état de santé bucco-dentaire était bon, avec des antécédents médicaux sans particularité.

Approche thérapeutique
Selon un protocole de forage à basse vitesse, le site implantaire a été préparé et l'implant mis en place. Une déhiscence vestibulaire a été observée. L'os autologue recueilli lors du forage a été appliqué sur les spires exposées, suivi de l'application d'Allodyn®. Une membrane Geistlich Bio-Gide® a été positionnée sur le greffon et stabilisée à l'aide d'une suture sous-périostée. Le lambeau vestibulaire a été refermé avec des sutures 5-0 Vicryl Rapide.

Résultat final
Une couronne a été fabriquée puis posée. Le patient s'est déclaré très satisfait du résultat, tant sur le plan esthétique que fonctionnel.

Mes recommandations

> Dans les défauts mineurs, tels qu'une déhiscence vestibulaire, j'utilise un allogreffe afin d'obtenir une néoformation osseuse plus rapide.

> J'associe systématiquement mes greffes osseuses à une membrane afin de favoriser une vascularisation à 360°.


> Je réalise une suture sous-périostée afin d'assurer la stabilisation de la membrane.




Avant le retrait de la prothèse partielle




Le jour de l'ajustage de la couronne, 3,5 mois après la pose de l'implant avec ROG simultanée

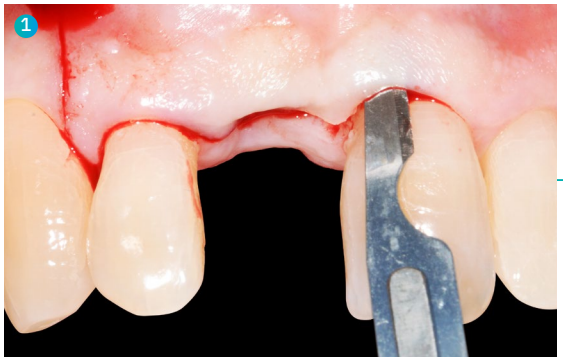


Un lambeau d'épaisseur totale est réalisé avec une incision verticale unique en distal.

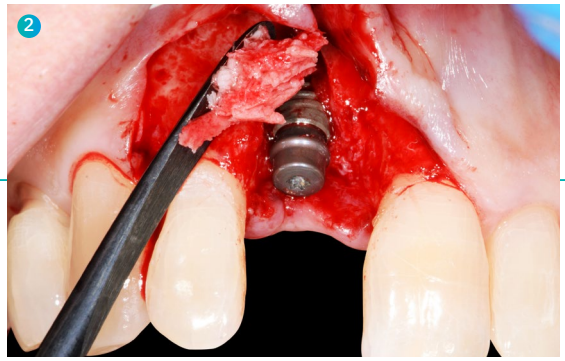

Après élévation du lambeau, l'implant est positionné dans une position idéale. La déhiscence vestibulaire est recouverte avec de l'os autologue recueilli lors du forage.

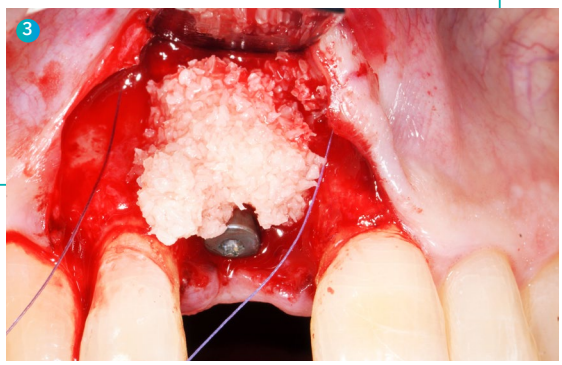

Des sutures sous-périostées 5-0 sont mises en place, et l'os autologue est recouvert avec Allodyn®.

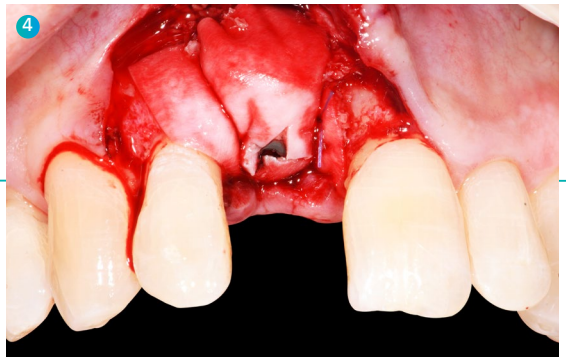

La membrane Geistlich Bio-Gide®, découpée sur mesure, est positionnée par-dessus le matériau de comblement et l'implant.



Le lambeau est refermé par des sutures en matelassier, complétées par des points simples interrompus.




Au bout de 12 semaines, l'implant est exposé pour permettre la connexion du pilier.

Produits utilisés

Allodyn® CS Fine
(0,5 cm³)



Geistlich Bio-Gide®
(25 mm × 25 mm)

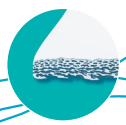

ROG en deux temps en secteur antérieur mandibulaire



Dr Romain Ohanessian,
Toulon, France

« Allodyn® est un matériau de comblement polyvalent et fiable, qui assure une stabilité volumique prévisible et une intégration naturelle pour un succès esthétique à long terme. »

Situation initiale
Le patient présentait une atteinte parodontale en phase terminale au niveau de la 31.

Approche thérapeutique
Le plan de traitement consistait en l'extraction de la dent suivie d'une augmentation osseuse horizontale simultanée afin de reconstruire la corticale vestibulaire et permettre un positionnement implantaire tridimensionnel correct à l'aide de la chirurgie guidée.

Résultat final
Ce cas démontre la faisabilité de la régénération osseuse en secteur antérieur mandibulaire, même dans des zones à épaisseur osseuse limitée. L'association d'Allodyn® et de Geistlich Bio-Gide® a permis une régénération complète et une restauration prothétique finale s'intégrant harmonieusement aux tissus environnants après une phase provisoire guidée.

Mes recommandations

> Utiliser Allodyn® pour la ROG en secteur antérieur afin d'optimiser le contour et le volume de la crête.

> Associer l'allogreffe à une membrane collagénique résorbable (Geistlich Bio-Gide®) afin de maintenir l'espace et stabiliser le défaut.


> Positionner les implants dans une position guidée par le projet prothétique afin d'assurer une fonction et une esthétique prévisibles.









Vue vestibulaire initiale objectivant une concavité osseuse au niveau de la 31 avec un support parodontal réduit.

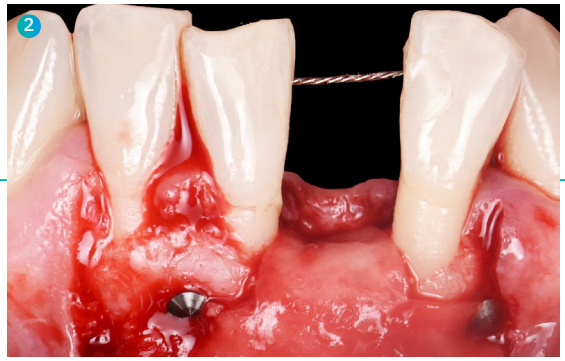


Après l'extraction de la 31 et le débridement, la membrane Geistlich Bio-Gide® est découpée et fixée sur la face linguale. Après un comblement dense avec Allodyn®, la membrane est fixée en vestibulaire puis insérée sous les tissus mous.

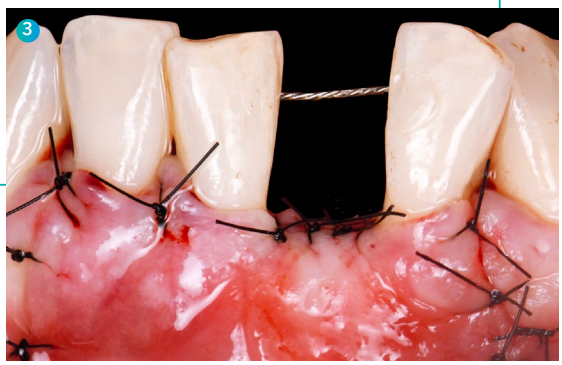

Le lambeau est refermé par des sutures simples interrompues.

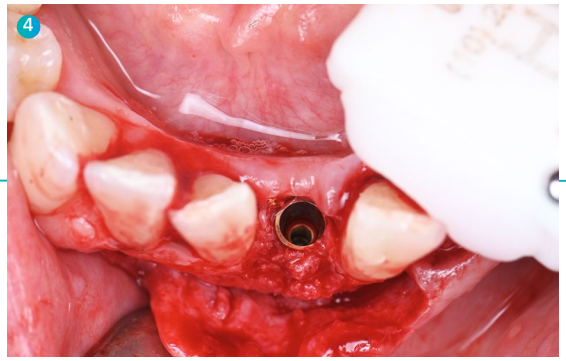

Après 4 mois, le lambeau est levé et l'implant est mis en place à l'aide d'une chirurgie guidée ; il est immédiatement mis en charge avec une couronne provisoire.

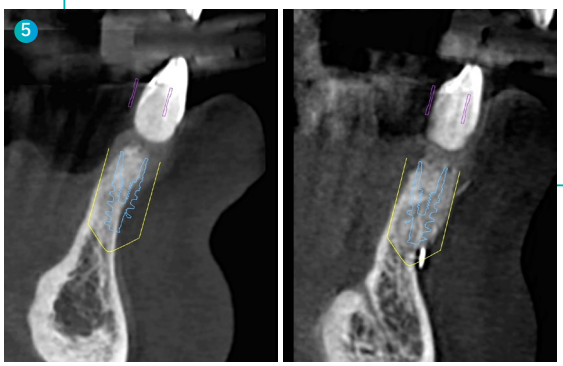

Comparaison avant/après montrant le volume osseux pour la pose d'implant.




Situation clinique après 2 semaines de cicatrisation avec restauration esthétique immédiate.

Produits utilisés

Allodyn® CS Fine
(2 cc)



Geistlich Bio-Gide®
(25 mm × 25 mm réduite à 16 × 22 mm)

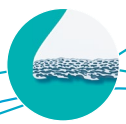

ROG en deux temps en secteur postérieur mandibulaire




Dr Romain Ohanessian,
Toulon, France


« L'association d'Allodyn® et de Geistlich Bio-Oss® permet d'obtenir un volume de greffe suffisant, garantissant une stabilité dimensionnelle prévisible et une intégration naturelle, et soutenant ainsi le succès implantaire à long terme.»

Situation initiale
Le patient présentait un édentement postérieur unilatéral gauche ainsi qu'une perte osseuse verticale et horizontale.

Approche thérapeutique
La Sausage Technique™ a été réalisée à l'aide d'une membrane collagénique résorbable Geistlich Bio-Gide® associée à un mélange d'Allodyn® et Geistlich Bio-Oss® afin d'obtenir un volume suffisant pour la pose des implants. Au bout de 4 mois, un lambeau a été soulevé et deux implants ont été posés dans la crête édentée.

Résultat final
Ce cas démontre la régénération osseuse en secteur postérieur mandibulaire grâce à la Sausage Technique™, permettant de traiter des défauts verticaux et horizontaux. L'association Allodyn®, Geistlich Bio-Oss® et Geistlich Bio-Gide® a permis une régénération complète et une restauration prothétique s'intégrant harmonieusement aux tissus environnants, assurant une stabilité à long terme.

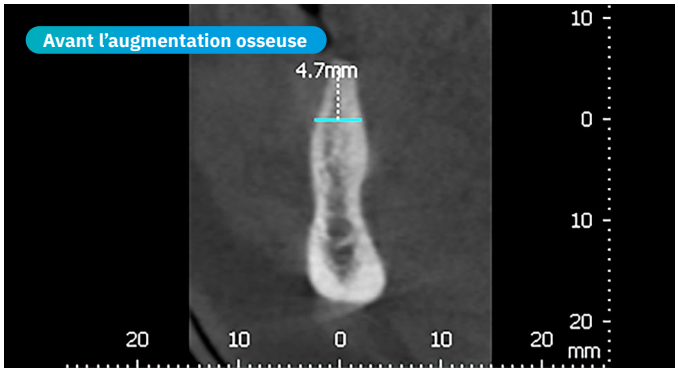

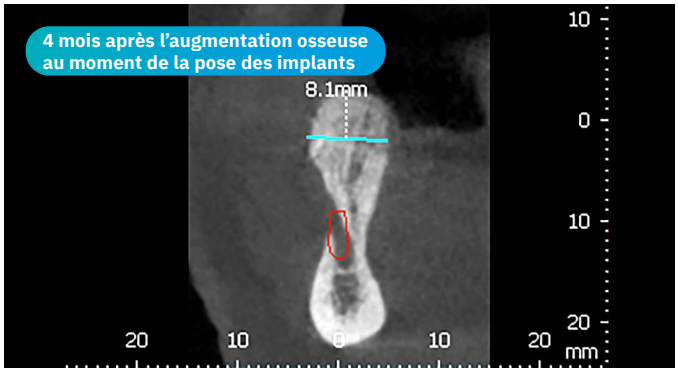


Mes recommandations

> Utiliser Allodyn® pour la ROG en secteur postérieur afin d'optimiser le volume de la crête et sécuriser la mise en place implantaire.


> Associer l'allogreffe une membrane collagénique résorbable (Geistlich Bio-Gide®) afin de soutenir la Sausage Technique™ en maintenant l'espace et en stabilisant le matériau de comblement.

> Réaliser une chirurgie guidée afin d'assurer une fonction prévisible.


Visionnez la vidéo :

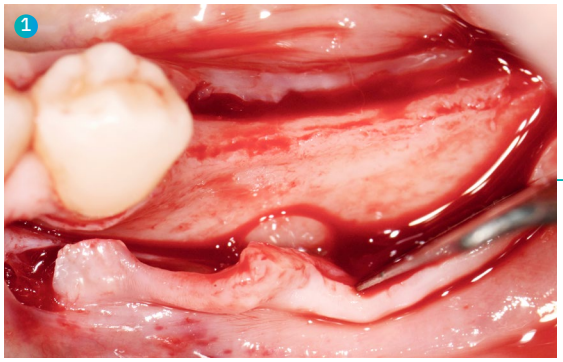


Situation clinique montrant une édentation postérieure mandibulaire avec une réduction de l'épaisseur de la crête.

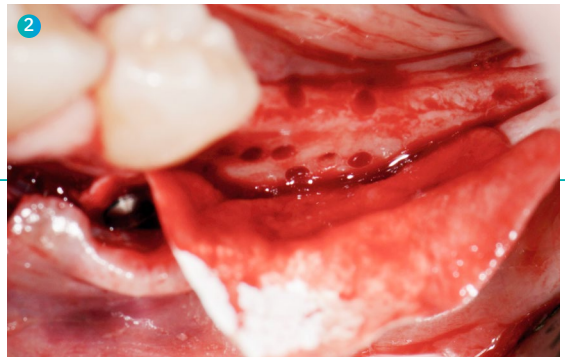


La membrane Geistlich Bio-Gide® est fixée par des pins en vestibulaire ; la corticale osseuse est perforée afin de favoriser le saignement.

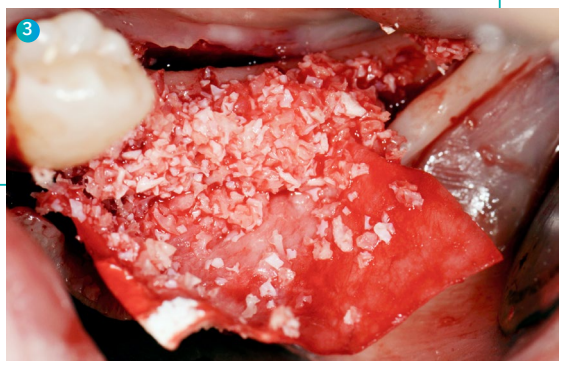

Allodyn® hydraté et Geistlich Bio-Oss® sont appliqués sur le site de greffe.

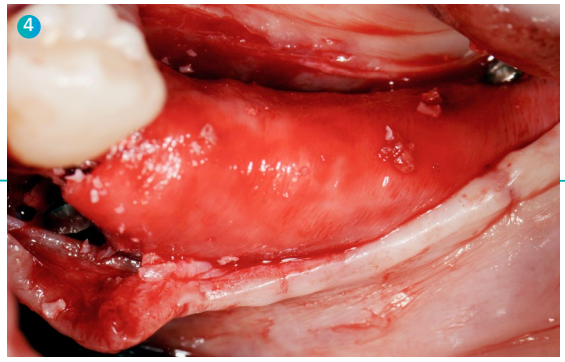

La membrane Geistlich Bio-Gide® est bien compactée puis fixée avec des pins sur la face linguale selon la Sausage Technique™.

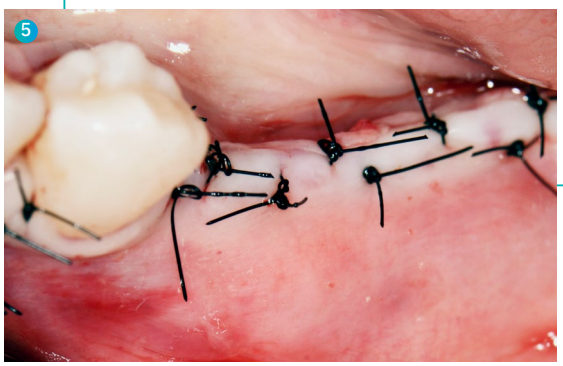

Le lambeau est refermé sans tension.



Après 4 mois, deux implants sont mis en place dans un os nouvellement augmenté, présentant une largeur suffisante et une excellente qualité.

Produits utilisés


Allodyn® CS Fine
(2 cm^3)



Geistlich Bio-Oss®
(1 g)



Geistlich Bio-Gide®
(30 × 40 mm)

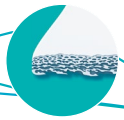

Élévation du plancher du sinus



Dr Amit Patel
Birmingham,
Royaume-Uni

« En utilisant Allodyn® pour l'élévation latérale du plancher sinusien, je peux poser les implants de manière prévisible à 5 mois, ce qui réduit le délai de traitement pour mes patients.»


Situation initiale
Le patient souhaitait un remplacement fixe des dents postérieures manquantes. La hauteur osseuse verticale étant insuffisante, une élévation du sinus était nécessaire.

Approche thérapeutique
Le plancher sinusien a été surélevé et une membrane Geistlich Bio-Gide® a été mise en place afin de protéger la membrane sinusienne avant le comblement de la cavité sinusienne avec un substitut osseux Allodyn®. Une membrane Geistlich Bio-Gide® a ensuite été placée sur la fenêtre latérale afin de protéger le comblement. Le lambeau vestibulaire a été refermé à l'aide de sutures 5-0 Vicryl Rapide.

Résultat final
À cinq mois post-opératoires, le CBCT a montré une bonne consolidation du comblement osseux Allodyn®, permettant la mise en place de deux implants aux sites 25 et 26. Un délai de trois mois a été respecté pour laisser les implants s'intégrer avant la restauration prothétique finale.



Bilan radiographique long cône avant la chirurgie

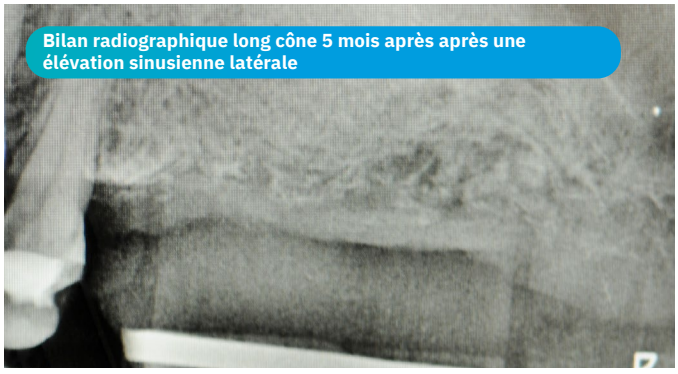


Bilan radiographique long cône 5 mois après après une élévation sinusienne latérale


Mes recommandations

> Pour les cas avec fenêtre latérale, je place toujours une membrane Geistlich Bio-Gide® pour protéger le plancher du sinus avant la mise en place d'Allodyn®.

> J'utilise Allodyn® afin de permettre un remodelage précoce et réduire le temps de cicatrisation pour poser les implants après seulement 5 mois.

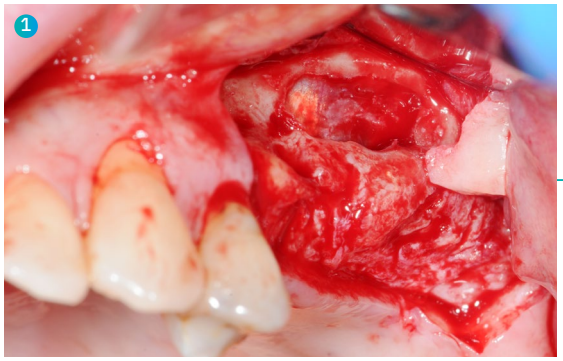


Maxillaire postérieur édenté présentant une hauteur osseuse verticale insuffisante pour la pose d'implants.

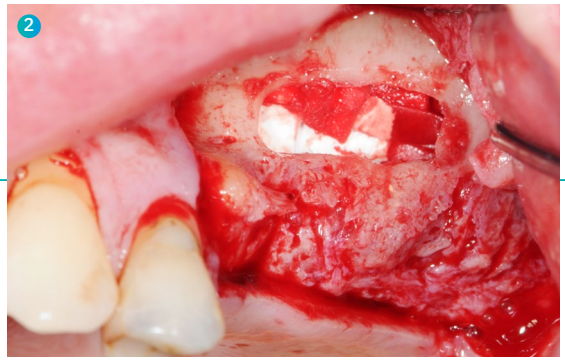


La fenêtre latérale est réalisée par piézochirurgie. La membrane de Schneider est protégée par une membrane Geistlich Bio-Gide®.



La cavité sinusienne est comblée avec Allodyn®.

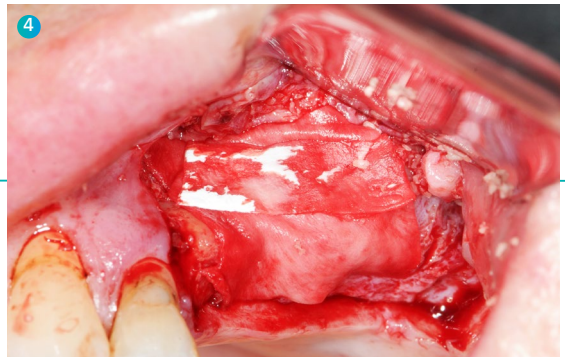

La fenêtre latérale est recouverte d'une membrane Geistlich Bio-Gide® selon une technique à double couche.

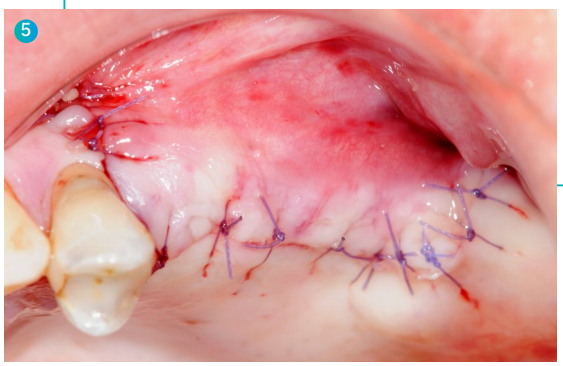

Le lambeau est refermé sans tension à l'aide de sutures simples interrompues en Vicryl Rapide 5-0.




5 mois après l'intervention chirurgicale, des implants de 4,1 × 10 mm et 4,8 × 10 mm sont posés avec un couple d'insertion élevé (65 N·cm).

Produits utilisés

Allodyn® CS Fine
(2 cm^3)



Geistlich Bio-Gide®
(30 mm × 40 mm)

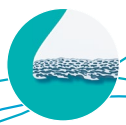

Chirurgie parodontale dans le maxillaire antérieur



Dr Azim Malik
Londres, Royaume-Uni

« J'utilise des allogreffes en association avec des dérivés de la matrice amélaire afin d'obtenir de meilleurs résultats en matière de régénération parodontale, garantissant ainsi une stabilité durable de la zone et une meilleure intégration tissulaire. »

Situation initiale
Le patient présentait une poche parodontale de 12 mm sur la face distale de la 13, destinée à servir de pilier pour une prothèse partielle.

Approche thérapeutique
Un lambeau mucopériosté a été soulevé et la lésion a été débridée. La racine a été conditionnée avec un dérivé de la matrice amélaire. Des particules cortico-spongieuses Allodyn® ont été appliquées et recouvertes d'une membrane Geistlich Bio-Gide®, fixée à l'aide de sutures périostées. Après le décollement périosté, le lambeau a été refermé à l'aide de sutures de matelassier et de sutures interrompues.

Résultat final
Cinq mois après l'intervention, la profondeur au sondage a été réduite de 12 mm à 3 mm. Une chirurgie mucogingivale est planifiée afin de corriger la récession résiduelle au niveau de la 11.





Mes recommandations


> Allodyn® CS Fine peut être utilisé de manière fiable pour la régénération des défauts parodontaux.

> Le comblement est facile à manipuler et à adapter, et peut être associé à des dérivés de la matrice amélaire ou à REGENFAST® (Mastelli S.r.l.) pour de meilleurs résultats.


> Pour les lésions plus étendues ou complexes, l'utilisation d'une membrane collagénique telle que Geistlich Bio-Gide® est recommandée.



La 13 présente une profondeur au sondage de 12 mm au niveau de la face distale.

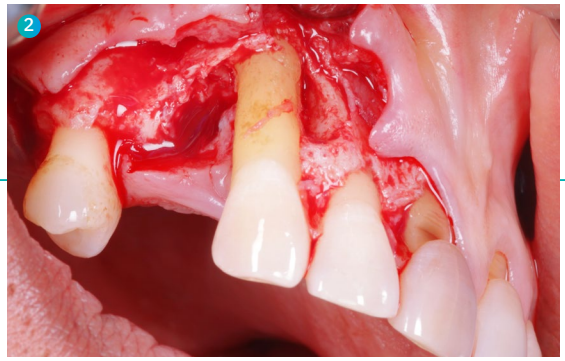

La lésion est nettement visible après l'élévation du lambeau.

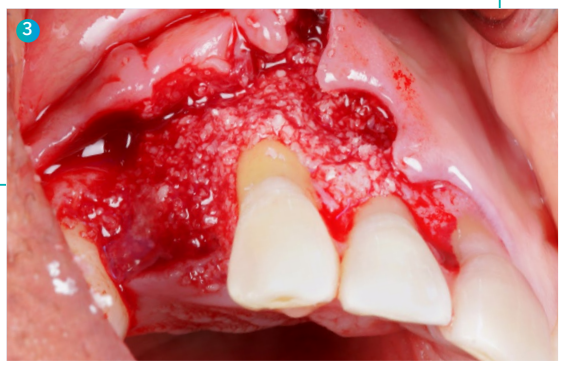

Les dérivés de la matrice amélaire (DMA) et Allodyn® sont appliqués sur la lésion.



La membrane Geistlich Bio-Gide® est mise en place puis stabilisée avec des sutures.



Le lambeau est refermé au moyen d'un surjet en U et de sutures simples interrompues.




Au suivi à 5 mois, la profondeur au sondage maximale est de 3 mm au niveau de la face distale.

Produits utilisés

Allodyn® CS Fine
(0,5 cm^3)



Geistlich Bio-Gide®
(25 mm × 25 mm)

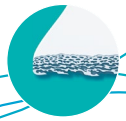

Geistlich – Engagée dans la médecine régénérative

Geistlich est le leader mondial dans le domaine de la régénération dentaire, s'appuyant sur plus de 175 ans d'expertise dans le traitement et le perfectionnement de l'os et des tissus mous. Nous nous consacrons au développement de produits fondés sur des données probantes qui favorisent la régénération de l'os, du cartilage et des tissus mous — garantissant ainsi une meilleure cicatrisation, une stabilité durable et une meilleure qualité de vie pour les patients.

Fort de milliers d'études scientifiques et des plus hauts standards de qualité suisses, nous façonnons le domaine de la médecine régénérative depuis des décennies. Grâce à nos programmes de formation mondiaux, touchant plus de 100 000 professionnels chaque année, et à nos partenariats étroits avec des scientifiques, des cliniciens et plus de 100 universités de renom à travers le monde, nous garantissons que les patients bénéficient des dernières avancées scientifiques et de méthodes de traitement de pointe.

Entreprise familiale depuis cinq générations, Geistlich défend la fiabilité, la confiance et l'innovation. Nous développons nos produits rigoureusement en ayant à l'esprit les dentistes, les chirurgiens et les patients — en enrichissant continuellement notre portefeuille grâce à des innovations internes et des partenariats stratégiques. Du cœur de la Suisse vers le monde entier, nous proposons des solutions durables permettant d'offrir les meilleurs soins possibles aux patients.



Progressez avec Geistlich

Geistlich a mis en place une gamme complète de services pour vous accompagner dans l'utilisation de biomatériaux de haute qualité pour vos traitements. Ces services comprennent des check-lists et des modèles, des documents d'information destinés aux patients, ainsi que des programmes de formation scientifique et des opportunités scientifiques avec Geistlich.



Documents d'information destinés aux patients

Informez vos patients à l'aide des supports d'information Geistlich, par exemple en leur présentant les différentes options de traitement, et augmentez ainsi leur taux d'acceptation des plans de traitement.



Checklists et modèles

Réduisez la complexité de la chirurgie orale et garantissez des procédures ainsi que des résultats constants grâce aux checklists et aux modèles de Geistlich.



Opportunités scientifiques

Participez aux différentes opportunités proposées par Geistlich à la communauté scientifique afin de contribuer à l'avancement de la régénération osseuse et des tissus mous. Déposez des demandes de financement de recherche et rejoignez les programmes Young KOL (jeunes leaders d'opinion) pour faire progresser le domaine de la régénération osseuse et des tissus mous.

Geistlich

Prêts pour l'étape suivante ?

1 Apprendre



En savoir plus sur Allodyn® :

2 Essayer



Réservez une démonstration de produit avec nos spécialistes produits :

3 Acheter



Vous avez hâte d'améliorer l'expérience de vos patients ?

karrdental

Distribution Suisse :
Karr Dental AG
Verenastrasse 4b
8832 Wollerau

+41 44 727 40 00

info@karrdental.ch
www.karrdental.ch

Plus d'informations sur nos partenaires de distribution :
www.geistlich-dental.com

Fabricant des produits Geistlich :
Geistlich Pharma AG
Business Unit Dental
Bahnhofstrasse 40
6110 Wolhusen, Suisse
Téléphone +41 41 492 55 55
www.geistlich-dental.com

Fabricant d'Allodyn® :
Laboratoires O.S.T.
13 Rue Henri Mondor
63360 Saint Beauzire France
ost-laboratoires.com
Tél. : +33 473 98 75 07

Références
1. Villate G. et al. : Orthop Traumatol Surg Res. 2015 Dec;101(8):953-7. (étude clinique).
2. Poumarat G, et al. : Rev Chir Orthop Réparatrice Appar Mot. 2004 Sep;90(5):442-8. (étude préclinique).
3. Surmenian J & Choukroun J: Clin Adv Periodontics. 2018;1-6. (étude clinique).
4. Données internes. (Laboratoires O.S.T., France).
5. Données internes. (Geistlich Pharma AG, Suisse).