leading regeneration

Geistlich
karrdental



Geistlich Bio-Gide® Forte

La performance que vous connaissez,
la manipulation que vous attendiez

swiss made

Geistlich Bio-Gide® Forte

Geistlich Bio-Gide® Forte est la toute dernière membrane de collagène bicouche de Geistlich. Elle s'appuie sur la technologie Geistlich Bio-Gide® éprouvée, qui a été validée par de vastes recherches scientifiques et des décennies d'utilisation clinique à travers le monde. Grâce à ses propriétés de manipulation spécifiques et à sa haute résistance à la traction, Geistlich Bio-Gide® Forte est conçue pour être utiliséedans un large éventail de cas de régénération osseuse et des tissus mous.[1, 2, 3]

Une durabilité au service de votre réussite

- **Résistance supérieure :** Geistlich Bio-Gide® Forte est conçue pour offrir une haute résistance à la traction, rendant cette membrane exceptionnellement résistante à la déchirure lors de la fixation.[2] Cette propriété est particulièrement précieuse dans les techniques de régénération avancées telles que la Sausage Technique™, où la pose de pins et de sutures est essentielle au maintien de l'espace et à la stabilité de l'augmentation osseuse.[4] Les chirurgiens peuvent compter sur la durabilité de la membrane, même dans les cas exigeants, tout en bénéficiant de la biocompatibilité éprouvée de la technologie Geistlich Bio-Gide®.[5]

Boostez vos performances avec des produits faciles et rapides à utiliser

- **Excellente manipulation :** Les chirurgiens bénéficient d'une membrane qui reste stable à l'état hydraté, se déplie aisément et s'adapte au contour de la crête. Geistlich Bio-Gide® Forte peut être repositionnée jusqu'à atteindre la position souhaitée.[1] Ces propriétés favorisent une manipulation prévisible et permettent un gain de temps pendant l'intervention.[1]

- **Procédure plus rapide, cicatrisation plus comfortable :** L'approche de cicatrisation à ciel ouvert avec Geistlich Bio-Gide® Forte réduit la nécessité d'une mobilisation étendue du lambeau, permet aux chirurgiens de gagner du temps tout en minimisant l'inconfort du patient pour une expérience de cicatrisation plus confortable.[6]


Des résultats exceptionnels sur lesquels vous pouvez compter

- **Efficacité prouvée à long terme :** Plus de deux décennies de recherche clinique confirment que l'os régénéré avec la technologie Geistlich Bio-Gide® et la technologie Geistlich Bio-Oss® présente des performances comparables à celles de l'os natif.[7] Des paramètres tels que la santé péri-implantaire, l'esthétique, les niveaux osseux marginaux et la survie implantaire démontrent des résultats comparables, offrant ainsi l'assurance de résultats thérapeutiques stables à long terme.[7]

Une manipulation conçue pour les chirurgiens


Geistlich Bio-Gide® Forte a été développée dans un souci de manipulation. Une fois hydratée, la membrane Geistlich Bio-Gide® Forte reste suffisamment robuste pour une utilisation aisée, tout en étant assez flexible pour se déplier en douceur, être découpée avec précision et s'adapter à différentes tailles et formes de défauts.[1]

Sa flexibilité permet un repositionnement sans perte de stabilité, offrant aux cliniciens une maîtrise idéale et assurant une couverture précise du défaut.[1]

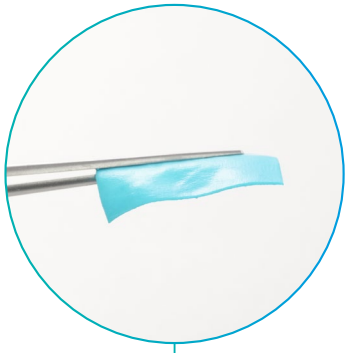

1. Rigidité à l'état hydraté

Contrairement aux membranes qui deviennent difficiles à manipuler une fois hydratées, Geistlich Bio-Gide® Forte conserve sa stabilité après hydratation.[1] Cette stabilité permet une manipulation précise, un positionnement aisé et une adaptation sécurisée sur le site du défaut.[1]

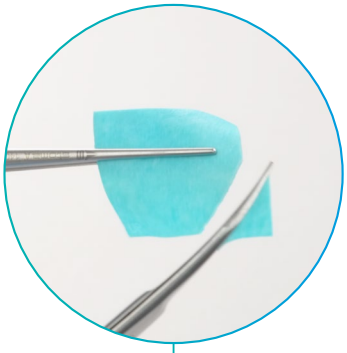

2. Découpe à l'état sec et hydraté

Les cliniciens peuvent découper Geistlich Bio-Gide® Forte aussi bien à l'état sec qu'à l'état hydraté.[1] Cette flexibilité permet d'adapter la membrane à la taille et à la forme du défaut au moment de l'intervention, garantissant une adaptation précise et une couverture optimale.[1]



3. Repositionnement facile

Geistlich Bio-Gide® Forte est une membrane flexible. Si des ajustements sont nécessaires, la membrane peut être soulevée, repositionnée et adaptée à plusieurs reprises jusqu'à atteindre la position finale souhaitée.[1] Cela peut réduire le stress lors de procédures complexes et favorise une couverture précise du défaut.[1]



4. Dépliage facile

La structure unique de Geistlich Bio-Gide® Forte empêche la membrane de se replier ou de coller.[1] Elle se déplie en douceur, permettant une préparation rapide et une mise en place intraorale aisée, tout en minimisant le risque de retards inutiles pendant l'intervention.[1]

Une confiance fondée sur la technologie éprouvée Geistlich Bio-Gide®

Depuis plus de 25 ans, la technologie Geistlich Bio-Gide® est utilisée avec succès dans des millions de procédures à travers le monde, avec des résultats cliniquement prouvés.[8] Geistlich Bio-Gide® Forte perpétue cet héritage en associant une excellente manipulation à une haute résistance à la traction, ce qui en fait la membrane de choix pour des résultats prévisibles et durables dans la régénération osseuse et des tissus mous.[1,2,8]

Là quand vous en avez besoin

La technologie Geistlich Bio-Gide® garde sa fonction de barrière pendant la phase critique de cicatrisation et se résorbe naturellement à mesure que la vascularisation et l'intégration tissulaire progressent.[9,10]

Éprouvée par la recherche et la pratique

- **Fiabilité à long terme :**
  La technologie Geistlich Bio-Gide® a été évaluée dans plus de 1 300 études, dont certaines avec plus de 20 ans de suivi.[7] Par ailleurs, plus de 10 millions de patients à travers le monde ont été traités avec la technologie Geistlich Bio-Gide®.[11]

- **Stabilité implantaire fiable :**
  Le succès à long terme d'un implant dépend de la solidité de sa fondation. L'utilisation conjointe de la technologie Geistlich Bio-Gide® et de Geistlich Bio-Oss® offre un support fiable à la régénération créant des conditions qui renforcent la stabilité et améliorent la survie implantaire au fil du temps.[12]

- **Survie implantaire supérieure :**
  Des études cliniques montrent que la technologie Geistlich Bio-Gide® améliore les taux de survie des implants par rapport aux sites traités sans membrane ou avec d'autres types de membranes, réduisant ainsi le risque d'échec implantaire.[12, 13, 14]

Prêts pour l'étape suivante ?

1 Apprendre

Plus d'informations sur Geistlich Bio-Gide® Forte

2 Acheter

Commandez les produits Geistlich ici

Geistlich

Scanner pour accéder aux références

Geistlich – engagée dans la dentisterie régénérative

Geistlich est le leader mondial en régénération dentaire, fort de plus de 175 ans d'expertise dans le traitement et le perfectionnement de l'os et des tissus. Nous nous engageons à développer des solutions fondées sur des preuves scientifiques, favorisant la régénération de l'os, du cartilage et des tissus mous — garantissant ainsi une meilleure cicatrisation, une stabilité durable et une meilleure qualité de vie pour les patients.

Progrès de la science et et de la prise en charge des patients
Avec plusieurs milliers d'études scientifiques et les normes de qualité suisses les plus strictes, nous façonnons le domaine de la médecine régénérative depuis des décennies. Grâce à nos programmes de formation mondiaux, touchant plus de 100 000 professionnels chaque année, et à nos partenariats étroits avec des scientifiques, des cliniciens et plus de 100 universités renommés à travers le monde, nous garantissons que les patients bénéficient des connaissances scientifiques les plus récentes et des méthodes de traitement les plus avancées.

Ancrée dans la tradition, portée par l'innovation
Entreprise familiale de cinquième génération, Geistlich incarne la fiabilité, la confiance et l'innovation. Nous développons nos produits rigoureusement en ayant à l'esprit les dentistes, les chirurgiens et les patients — élargissant sans cesse notre portefeuille par le biais d'innovations interne et de partenariats stratégiques. Depuis le cœur de la Suisse jusqu'au monde entier, nous proposons des solutions durables qui permettent d'offrir la meilleure prise en charge possible aux patients.

Évoluez avec Geistlich

Programmes de formation
Formations complètes et personnalisées, destinées à tous les professionnels dentaires, incluant Geistlich myGuide®, une expérience d'apprentissage flexible à votre rythme.

Checklists et modèles
Geistlich propose des outils pour simplifier la chirurgie orale et garantir des résultats constants.

Sensibilisation du patient
Geistlich propose des supports pour contribuer à la sensibilisation des patients et augmenter les taux d'acceptation des cas.

Opportunités scientifiques
Geistlich soutient la communauté scientifique en offrant des opportunités telles que des bourses de recherche et des programmes Young KOL (jeunes leaders d'opinion) pour faire avancer la régénération de l'os et des tissus mous.

Geistlich Bio-Gide® Forte existe en trois tailles pratiques :

13 × 25 mm
25 × 25 mm
30 × 40 mm

Commander:



Fabricant
Geistlich Pharma AG
Bahnhofstrasse 40
6110 Wolhusen
Suisse
+41 41 492 55 55
info@geistlich.com
www.geistlich.com

karrdental

Distribution Suisse
Karr Dental AG
Verenastrasse 4b
8832 Wollerau
Suisse

+41 44 727 40 00
info@karrdental.ch
www.karrdental.ch

swiss made

603157/2603/fr © 2026 Geistlich Pharma AG – Sous réserve de modification